




User Manual for usmile Sonic Electric Toothbrush P1

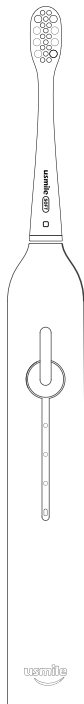

Model P1

CE **FC** **IPX7** **UK** **CA**  
EAC

EC

REP

THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468),
Deutschland
E-mail: legal@themisar.com
Tel: +49-21173714852

UK

REP

THEMIS AR support ltd
85 Great Portland St, London,
United Kingdom, W1W 7LT
E-mail: legal@themisar.com
Tel: +44-02037332302

Описание деталей

1. После установки насадки между ее нижней частью и ручкой останется зазор в 0,5-1 мм. Он нужен для нормальной вибрации насадки щетки.

2. Включение: ненадолго зажмите кнопку Вкл/Режима, чтобы включить щетку.

3. Смена режима: нажмите кнопку Вкл/Режима еще раз, чтобы перевести щетку в другой режим в течение четырех секунд с момента включения устройства.

4. Приостановка и выключение: снова нажмите кнопку Вкл/Режима, чтобы поставить устройство на паузу через четыре секунды после включения. По умолчанию пауза длится 20 секунд. Если нажать кнопку еще раз в течение этих 20 секунд, то устройство возобновит работу. Если в течение этих 20 секунд пауза не будет прервана, то устройство выключится автоматически.



Зарядный кабель Type-C



Насадки щетки usmile



Руководство пользователя

Меры безопасности

Во избежании риска повреждений, ударов током, травм, пожара и порчи имущества, пожалуйста, соблюдайте следующие меры безопасности:

1. Прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Прибор не является игрушкой. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

2. Данное изделие работает только от безопасного сверхнизкого напряжения, указанного на маркировке изделия.

3. Не подвергайте прибор или батарею воздействию чрезмерных температур. Помните о риске короткого замыкания контактов прибора при работе от батарей или самих батарей от металлических предметов.

4. Устройство содержит батареи, заменять которые должны только лица с опытом такой замены.

5. В инструкциях для приборов класса III указано, что они должны работать только от безопасного сверхнизкого напряжения.

6. Не разбирайте устройство, кроме как для утилизации. Отсоедините его от источника питания перед извлечением батареи. Разрядите батарею перед разборкой. Для разборки пластикового корпуса используйте соответствующие инструменты, чтобы избежать повреждения батареи или короткого замыкания. После извлечения перережьте провода батареи и вставьте батарею в соответствующий приемник для безопасной переработки.

7. Изделие содержит встроенную аккумуляторную батарею. Не кладите ее в огонь, на солнечный свет, не подвергайте воздействию высоких температур и не заряжайте во влажном помещении. Это может привести к утечке батареи, перегреву и/или взрыву. По завершении зарядки отсоедините кабель для зарядки и отключите питание.

8. Не модифицируйте, не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно. Не используйте устройство во

время купания, в душе или в сауне. Во время зарядки следите за тем, чтобы зарядный кабель и разъем зарядки устройства оставались сухими и чистыми. Не пытайтесь удалять пятна или загрязнения, так как процесс зарядки может стать небезопасным.

9. В случае тяжелого периодонтита, прохождения стоматологического лечения или в случае дискомфорта в полости рта перед использованием изделия проконсультируйтесь со своим стоматологом. Лица, проходящие ортодонтическое лечение, лечение зубов или имеющие зубные импланты, должны обратиться к стоматологу.

10. В начале использования изделия десны могут немного кровоточить, пока не привыкнут к процессу чистки. Это пройдет в течение одной-двух недель. Если кровотечение сохраняется более двух недель, это может указывать на заболевание десен. В этом случае прекратите пользоваться изделием и проконсультируйтесь со своим стоматологом.

11. Перед использованием изделия проверьте его на наличие повреждений. Если прибор имеет повреждения, трещины, ржавчину, немедленно прекратите его использование. Если вилка или шнур питания повреждены, замените их перед использованием прибора.

12. Прибор предназначен для чистки полости рта. Не используйте его для каких-либо других целей. Если при использовании прибором вы чувствуете дискомфорт или боль, прекратите использование и немедленно обратитесь к своему стоматологу.

13. Изделие соответствует требованиям стандартам безопасности электромагнитных устройств. По любым вопросам, связанным с кардиостимуляторами или другими имплантируемыми устройствами, перед использованием прибора проконсультируйтесь со своим врачом или производителем устройства.

14. Храните изделие в недоступном для детей месте. Изделие содержит мелкие детали, например, крышку головки щетки, которые не следует проглатывать. При использовании нового изделия или при замене головки щетки снимите крышку с головки.

15. В любых условиях работы используйте источник питания мощностью не более 15 Вт.

Электромагнитные поля (ЭМП)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Это устройство соответствует всем стандартам, касающихся электромагнитных полей. Его использование безопасно при соблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве. Если у вас в теле кардиостимулятор или другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь со своим врачом и производителем устройства до начала его использования.

Чистка зубов



Чистите зубы правильно. Рекомендуется держать угол в 45° между щетинками щеткой и зубами при чистке их внутренней и внешней поверхности — так чистка будет наиболее эффективна.

Зарядка

- 1.Зубная щетка была заряжена при выпуске с завода и готова к использованию.
- 2.Если индикатор мигает красным, зарядите зубную щетку при первой возможности. На полную зарядку батарею уйдет от 4 до 5 часов.
- 3.Заряжайте зубную щетку с помощью USB-адаптера, который соответствует применимым стандартам. На время зарядки держите щетку в сухом месте.
- 4.Старайтесь заряжать зубную щетку до того, как закончится заряд батареи.

Красный:
Требуется
зарядка
Мигает белым:
идет зарядка
Белый:
Полностью
заряжено



Откройте порт
зарядки





Закройте порт должным образом



Чистка и хранение

Завершив чистку, нажмите кнопку переключения, чтобы выключить зубную щетку. Сполосните насадку и ручку щетки чистой водой. Высушив щетку полотенцем, поставьте ее вертикально на сухую поверхность или в стакан, не допуская ее падения.

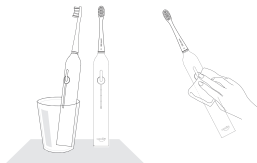

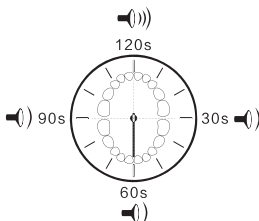

Мысленно разбейте зубы на четыре зоны и чистите каждую из них в течение 30 секунд.

Описание режимов

Режим чистки: Данный режим позволяет чистить зубы с умеренным напором в течение четырех минут. Каждые 30 секунд электрическая зубная щетка будет вибрировать, напоминая о необходимости перейти к другой зоне зубов. После первых двух минут устройство трижды подряд провибрирует, обозначив конец чистки. Если вы не остановите щетку нажатием кнопки, она будет работать до тех пор, пока не кончится четвертая минута.

Режим отбеливания: Чистка зубов в течение 2 минут с усиленным напором и постоянным изменением частоты вибрации щетки. В этом режиме электрическая зубная щетка вибрирует каждые 30 секунд, сообщая вам, что пора перейти к другой зоне зубов. Спустя две минуты использования щетки в течение следующих 30 секунд будет производиться полировка внешней поверхности зубов.

Мягкий режим: Мягкая чистка зубов в течение четырех минут. В этом режиме электрическая зубная щетка вибрирует каждые 30 секунд, сообщая вам, что пора перейти к другой зоне зубов. После первых двух минут устройство трижды подряд провибрирует, обозначив конец чистки. Если вы не нажмете кнопку, чтобы остановить щетку, она будет работать до тех пор, пока не кончится четвертая минута.

Сведения о продукте

Наименование: Электрическая зубная щетка

Торговая марка: usmile

Модель: P1

Потребляемая мощность: 5V --- 1A

Номинальная входная мощность: 5W

Уровень влагостойкости: IPX7

Спецификации батареи: литиевая батарея 3.7V 2500mAh

Изготовитель: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

Контактное лицо службы поддержки клиентов:

service@usmile.com

Сделано в Китае

Сбои и способы их устранения

Сбои	Возможные причины	Решения
Щетка не включается при нажатии кнопки Вкл/Режим	Устройство находится в режиме защиты во время зарядки.	Прекратите зарядку.
	Низкий заряд батареи.	Подсоедините кабель питания для зарядки.
Не удастся вставить насадку в ось привода	В разъеме посторонние объекты.	Аккуратно извлеките посторонние объекты из разъема.
	Ось привода заблокирована посторонним объектом.	Очистите ось привода.
	Насадка щетки не является продуктом usmile.	Замените ее на совместимую насадку usmile.
Насадка слабо вибрирует	Насадка не закреплена на месте.	Подсоедините насадку заново
	Между насадкой и держателем насадки есть посторонний объект.	Вытащите насадку, чтобы извлечь посторонние объекты.
Во время зарядки не горит индикатор батареи.	Электропитание не поступает.	Подключите кабель питания правильным образом.
После зарядки устройство работает непродолжительное время.	Низкая температура окружающей среды.	Заряжайте и используйте устройство в помещении с температурой от 15° и до 35°.
	Слишком короткое время зарядки.	Зарядите устройство.
Устройство не включается.	Низкий заряд батареи.	Зарядите устройство.

Изготовитель, адрес изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.
Место нахождения:Room 2001,2002,2003,2004,2005,
No. 239 Tianhe North Road, Tianhe District, Guangzhou City,
Guangdong Province, China

Соответствует

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ЕАС

Информация об импортере указана на внешней части
упаковки.

Правила и условия хранения

Срок службы 3 года

Условия хранения:

Температура: от -20°C до +60°C

Относительная влажность: от 10% до 90%, без конденсации.

Правила и условия транспортировки

Транспортировка устройства допускается только в
заводской упаковке, любым
видом транспорта, без каких-либо ограничений по
расстоянию.

Правила и условия реализации

- Без ограничений

Правила и условия утилизации

- По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром usmile, чтобы получить информацию о его утилизации.

Дата производства изделия

Код даты производства напечатан на дне продукта и состоит из 5 символов.

- Первый символ — буква, обозначающая год (начиная с 2016 г. в возрастающем алфавитном порядке). Например: А обозначает 2016 г., В обозначает 2017 г., С обозначает 2018 г. и так далее.
- Второй и третий символы — цифры, обозначающие месяц. Второй символ указывает десятки, третий — единицы. Из получившегося двузначного числа вычитите 12, например: $15 - 12 = 3$ обозначает март.
- Четвертый и пятый символы — цифры, обозначающие день месяца. Правила расчета те же, что и при расчете месяца, например: $26 - 12 = 14$, то есть 14-е число.