

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Размер упаковки: 500x130 мм

Окончательный размер: 100x130 мм



Чтобы снизить риск неисправности, поражения электрическим током, травм, пожара, гибели людей и повреждения оборудования, внимательно прочтите все инструкции и предупреждения, содержащиеся в данном руководстве.

Основное назначение

- Снимает боль в мышцах
- Способствует циркуляции крови
- Снимает скованность шейных позвонков

Запрещенные виды использования

1. Несовершеннолетним запрещается пользоваться данным устройством, так как оно не предназначено для игр
2. Если устройство случайно упадет в воду, отправьте его на осмотр.
3. Запрещается помещать устройство близко к источнику огня или бросать его в огонь
4. Запрещается использовать устройство в области головы, шеи, сердца и гениталий.
5. Запрещается прикладывать это устройство к костям, только к мягким тканям тела.
6. Запрещается использовать для зарядки неоригинальные зарядные устройства, которые могут привести к возгоранию устройства
7. Запрещается намеренно ронять устройство.
8. Запрещается откручивать винты или пытаться разбирать устройство.
9. Использование оборудования для замены или дополнения терапевтического лечения запрещено. Перед использованием устройства, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
10. Запрещается располагать пальцы, волосы или другие части тела вблизи стержня и задней части массажной насадки, чтобы избежать защемления.




Не прикасайтесь к этой области при включении устройства без установленной массажной насадки.



При установке массажной насадки и включении устройства не прикасайтесь к этой области

Знакомство с устройством

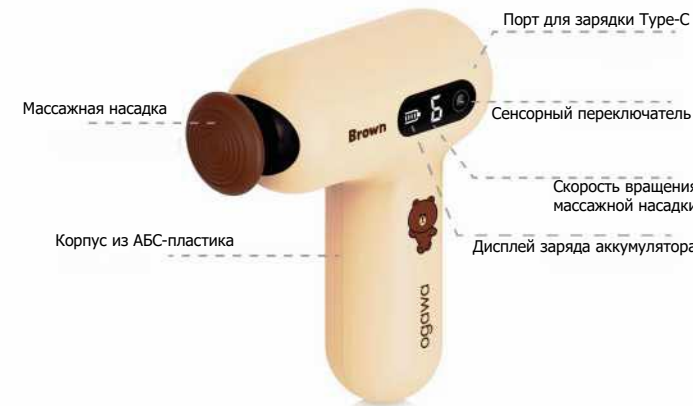


Параметры устройства:	
Наименование: перкуссионный массажер	Количество скоростей: 6
Модель: OG 1106	Метод нажатия кнопки: нажать на кнопку
Тип интерфейса: Тип-C	Вес устройства: ≈ 433 г (с T-образной насадкой)
Вход для зарядки: 5V—2A	Размер: 149 * 117 * 54 мм
Массажный ход: 6 мм	Температура рабочей среды: 0-45 °C
Емкость аккумулятора: 2000 мАч	

Массажная насадка



Установите массажную насадку

Когда устройство выключено, медленно вставьте массажную насадку в ствол массажера. Как показано на рисунке, совместите положение красной линии массажной насадки с положением красной линии устройства.

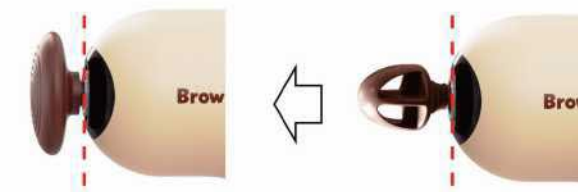

- Дата покупки указана на основании действительного документа, выданного на момент покупки.
- Настоящая гарантия не распространяется на аренду, торговлю, коммерческие помещения, учреждения или иное нежилое использование.
- Настоящие условия гарантии и нормативные акты действительны только в рамках местных продаж.
- Какие-либо детали, замененные в течение гарантийного срока, являются собственностью компании OGAWA.

Гарантия не распространяется на следующие ситуации, но доступны платные услуги по ремонту:

- Повреждения, вызванные человеческим фактором, включая неправильное использование источника питания, эксплуатацию в ненормальных условиях, несоблюдение инструкций по эксплуатации и хранению, неправильную эксплуатацию и самоповреждения устройства при транспортировке.
- Несанкционированная разборка, ремонт или модификация устройства пользователем или третьими лицами, не имеющими полномочий.
- Износ или царапины на внешней поверхности устройства и аксессуаров (таких как чехлы, тканевые накладки, декоративные поверхности и т.д.), а также естественный износ расходных материалов (таких как аккумулятор).
- Ущерб, причиненный другими форс-мажорными факторами (такими как наводнения, пожары, удары молний, землетрясения и т.д.).
- Гарантия не соответствует фактическому устройству или было изменено.
- Невозможно предоставить оригиналы квитанций о покупке и действительных инвойсов.

Внимание

По истечении срока бесплатной гарантии, мы предоставим платные услуги по ремонту (с оплатой труда и материалов). Если устройство будет разобрано, отремонтировано или модифицировано пользователем или третьими лицами, не имеющими полномочий, то настоящее гарантийное обслуживание будет недействительным, и оно будет немедленно прекращено.

Техническое обслуживание

1. Если устройство не используется в течение длительного времени, полностью зарядите аккумулятор, выключите питание и поместите устройство в безопасное, сухое, проветриваемое место с низкой температурой.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор каждые шесть месяцев.
3. Для ежедневного технического обслуживания, используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань для протирания. Не используйте масло, органические растворители или другие химические чистящие средства, которые не следует добавлять в воду для промывания.
4. Перед чисткой устройства, отключите питание.
5. Во время транспортировки устройство должно быть закреплено, чтобы предотвратить скатывание и падение.

Гарантийное обслуживание

Благодарим вас за покупку продукта компании OGAWA! Мы подтвердим Ваш заказ на покупку и соответствующий период бесплатного гарантийного обслуживания в соответствии с соответствующими условиями Вашего гарантийного обслуживания. С момента покупки устройства OGAWA Вы получаете право на бесплатное гарантийное обслуживание в случае неисправности в течение гарантийного срока. Способ получения гарантии: заказчики должны самостоятельно отправить товар в ближайшие точки продаж.

Условия гарантии

- Гарантийное обслуживание предоставляется в течение гарантийного срока с момента покупки.
- Действующий гарантийный срок на данное устройство составляет один год.
- Данная гарантия не подлежит передаче другому лицу.
- При обращении по гарантийному обслуживанию, предъявите оригинал чека о покупке.

Защита окружающей среды

По истечении срока службы данного устройства, поместите его в соответствующую емкость для отходов, назначенную Вашим правительством, для экологически безопасной утилизации.

• Название и содержание опасных веществ в устройстве

	Токсичные и вредные вещества или элементы				
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	(ПБД)
Корпус	○	○	○	○	○
Плата	x	○	○	○	○
Металлические детали	x	○	○	○	○
Соединительная линия	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями стандарта SJ/T11364 : Содержание токсичных и вредных веществ ниже предельных значений, указанных в стандарте GB/T 26572.
x : Содержание токсичных и опасных веществ превышает предельные требования, указанные в стандарте GB/T 26572.

• Описание периода использования для защиты окружающей среды

Данное электронное устройство, при соблюдении условий эксплуатации, указанных в руководстве, содержит токсичные и вредные вещества или элементы, которые не могут вытечь наружу, загрязняя окружающую среду или причинить серьезный ущерб людям и имуществу в течение 10 лет.

Цифры на этой этикетке указывают на то, что срок службы устройства, защищенного от воздействия окружающей среды, при нормальной эксплуатации составляет 10 лет. Некоторые компоненты также могут иметь маркировку срока службы в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, и срок службы в соответствии с требованиями охраны окружающей среды определяется цифрами на этикетке.



Руководство по эксплуатации

1. **Запуск устройства и переключение скоростей:** нажмите и удерживайте сенсорный переключатель более 1 секунды, после чего устройство перейдет в режим пробуждения, а на экране дисплея отобразится скорость 0. После короткого нажатия устройство перейдет на первую скорость. Каждое короткое нажатие увеличивает интенсивность вибрации на одну скорость, всего устройство поддерживает 6 скоростей. На экране дисплея отобразятся соответствующие номера скоростей.
2. **Выключение:** в рабочем режиме нажмите и удерживайте сенсорный переключатель более 1 секунды, чтобы выключить устройство.
3. **Индикатор заряда аккумулятора:** на экране дисплея отображается соответствующий уровень заряда аккумулятора. При низком уровне заряда аккумулятора, значок аккумулятора автоматически погаснет после 5-кратного мигания, напоминая пользователю о необходимости зарядки устройства.
4. **Функция управления временем:** после запуска устройство автоматически остановится после непрерывной работы в течение 10 минут.
5. **Защита от блокировки ротора:** если устройство будет заблокировано более чем на 2 секунды, она перейдет в режим защиты. Экран дисплея будет мигать в качестве напоминания, и короткое нажатие в течение 5 секунд возобновит работу устройства. Если никаких операций не будет, он автоматически выключится.

Зарядка

- Перед первым использованием, полностью зарядите аккумулятор устройства.
- Выключите устройство и подсоедините зарядный кабель типа-c к зарядной насадке (предпочтительно 5V2A). Значок аккумулятора, соответствующий уровню заряда, мигает, указывая на то, что он заряжается.
- Если значок аккумулятора постоянно горит, это означает, что он полностью заряжен.
- Не запускайте устройство во время зарядки. Не удайте включить устройство во время зарядки.

Часто задаваемые вопросы

- Не включается или не хочет включаться
1. **Слишком низкая температура:** Длительное воздействие на лицевую панель массажера при температуре ниже 0 градусов Цельсия может привести к снижению заряда аккумулятора и невозможности правильного запуска. Кажется, что все устройство может нормально запускаться, но не может работать ни в положительном, ни в отрицательном режиме.
 2. **Недостаточный заряд аккумулятора:** Если аккумулятор не заряжается в течение длительного времени, он разрядится в режиме защиты от громкости, и перкуссионный массажер не сможет работать должным образом. Решение: убедитесь, что после полной зарядки аккумулятора массажер можно использовать в обычном режиме.

Устранение неполадок
1. Устройство не работает. Проверьте, хватает ли мощности.
2. Панельная индикаторная лампа не работает. Проверьте, хватает ли мощности.
3. Новое устройство издает небольшой ненормальный звук, что является нормальным явлением.
4. Аккумулятор невозможно зарядить, он разряжается. Замените его.

Техническое обслуживание

1. Если устройство не используется в течение длительного времени, полностью зарядите аккумулятор, выключите питание и поместите устройство в безопасное, сухое, проветриваемое место с низкой температурой.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор каждые шесть месяцев.
3. Для ежедневного технического обслуживания, используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань для протирания. Не используйте масло, органические растворители или другие химические чистящие средства, которые не следует добавлять в воду для промывания.
4. Отключите питание, если устройство не используется или перед чисткой.
5. во время транспортировки устройство должно быть закреплено, чтобы предотвратить скатывание и падение.

Свяжитесь с нами

Компания Baiji International Sdn Bhd
47301, Малайзия, штат Селангор, Петалинг-Джая, Джалан-Пью 1А/3, Ара
Дамансара, Резиденция H2O, блок А, первый этаж, G-02.



Сделано в Китае